



ECÓGRAFOS PORTÁTILES

PARA EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL GANADO

airScan pro


IMPERMEABLE, LIGERO, CON DOPPLER

Un ecógrafo ligero, robusto e inalámbrico diseñado para veterinarios que tratan ganado vacuno y equino.

Esta tecnología de vanguardia se encuentra alojada en una carcasa de aluminio impermeable y ofrece una excelente calidad de imagen y un modo Doppler de alta sensibilidad.

La capacidad de conexión con las gafas inalámbricas iLens garantiza la ergonomía y la seguridad en el trabajo. Las baterías intercambiables garantizan energía suficiente para un día completo de exploración.

- Peso: aprox. 0,6 kg con sonda y batería
- Impermeabilidad hasta el grado de protección IP65
- Tiempo de funcionamiento continuo con carga completa de hasta 2 horas
- Tiempo de carga de la batería: hasta 2 h (5V 3A QC, PD)
- Compatibilidad con sistema Android/iOS
- Sondas:
 - Rectal lineal 4,2-12,5 MHz, alcance hasta 19 cm
 - Rectal convexa 3-7 MHz, alcance hasta 30 cm
- Compatible con **las gafas iLens**

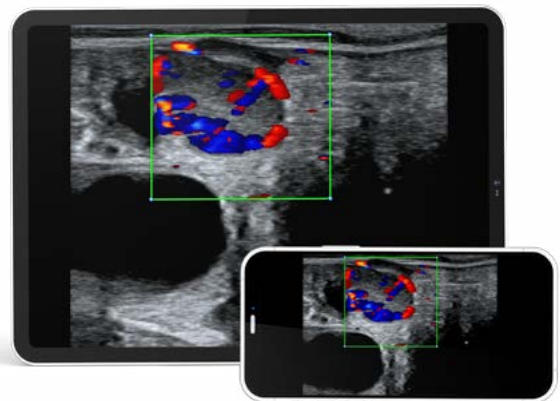

Cuerpo lúteo activo



Feto



Corazón del feto



Útero

iScan mini

- Peso: 1,35 kg con sonda y batería
- Dimensiones 14 x 17 x 5 cm
- Tiempo de funcionamiento continuo con carga completa de hasta 3 h 40 min.
- Sondas: ① o ②
- Compatible con **las gafas iLens**

LIGERO Y PRECISO

Si trabajas con ganado y buscas un ecógrafo ligero con posibilidad de visualización en pantalla y en gafas, el iScan mini es para ti. El más pequeño y ligero de la línea de ecógrafos con pantalla integrada para la exploración rectal. Permite determinar la preñez en vacas en el período embrionario temprano y confirmar el sexo a partir del día 55.



iScan 2

- Peso: 2,4 kg con sonda y batería
- Alto nivel de resistencia al polvo y al agua
- Tiempo de funcionamiento continuo con carga completa de hasta 7 horas
- Sondas: ① o ②

TRABAJO EFICAZ EN CUALQUIER CONDICIÓN

iScan 2 es el estándar más alto en reproducción de ganado bovino. Imágenes detalladas y de fácil interpretación, una gran pantalla integrada y un diseño robusto y ligero. Con un uso aún más sencillo gracias al teclado universal, apto para diestros y zurdos, con menús de acceso rápido personalizables.



iScan 2 MULTI

- Peso: 2,6 kg con sonda y batería
- Amplia selección de sondas
- Tiempo de funcionamiento continuo con carga completa de hasta 7 horas

DIAGNÓSTICO INTEGRAL

Ecógrafo de campo con sondas intercambiables para el diagnóstico integral de diversos tipos de ganado. Un dispositivo fiable, la elección más frecuente entre los veterinarios de numerosas especialidades.



- Sondas: ① ② ③ ④ ⑤

iScan 3

VERSÁTIL Y MODERNO


Una gama en constante evolución de sondas compatibles que proporcionan flexibilidad en el abordaje del paciente.

Las funciones más importantes son accesibles desde el teclado. Los atajos de teclado específicos agilizan el trabajo, y las mediciones utilizadas recientemente se establecen como predeterminadas. La posibilidad de personalizar las descripciones permite organizarlas en un orden adecuado.

El modo de imagen Doppler en color permite diagnosticar la actividad del cuerpo lúteo entre 18 y 20 días después de la inseminación. Esto permite identificar las vacas que no han sido fecundadas antes de que se produzca el siguiente celo. El encendido instantáneo y los ajustes optimizados garantizan la comodidad y la facilidad de uso.

- Peso: 2,6 kg con sonda y batería
- Dimensiones 27 x 18 x 7 cm
- Modo Doppler
- Tiempo de funcionamiento continuo con carga completa de hasta 4 horas

- Sondos: **1 2 3 4 5**
- Compatible con **las gafas iLens**

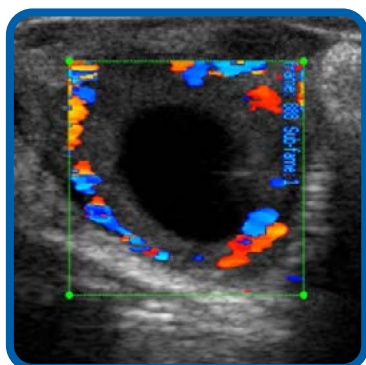

Quiste lúteo




28º día de embarazo




Embarazo

SONDAS

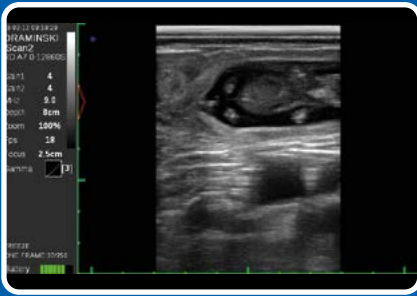


Embarazo - becerra

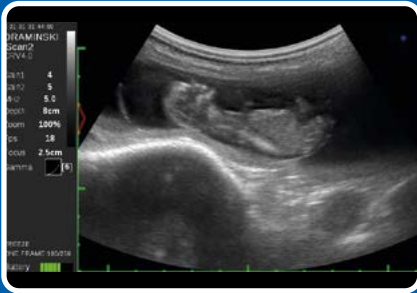

Embarazo



Ubre

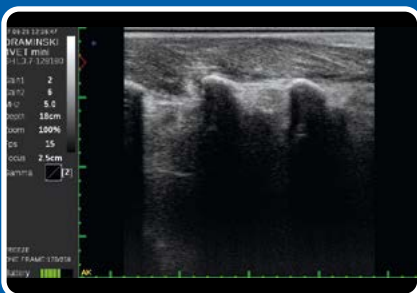

Medición del grosor del tejido adiposo



Procedimiento OPU

1 Rectal lineal

- Frecuencia: 4,0 - 9,0 MHz (7,0 MHz)
- Longitud de la lente: 60 mm
- Profundidad de exploración: 30 - 150 mm



2 Rectal convexa

- Frecuencia: 2,0 - 8,0 MHz (5,0 MHz)
- Radio de la lente: 60 mm
- Profundidad de exploración: 60 - 300 mm



3 Abdominal convexa

- Frecuencia: 2,0 - 8,0 MHz (5,0 MHz)
- Radio de la lente: 50 mm
- Profundidad de exploración: 60 - 300 mm



4 Grasa dorsal (Backfat)

- Frecuencia: 2,0 - 5,0 MHz (3,7 MHz)
- Longitud de la lente: 147 mm
- Profundidad de exploración: 60 - 300 mm



5 Extracción de ovocitos (OPU)

- Frecuencia: 4,0 - 9,0 MHz (6,5 MHz)
- Radio de la lente: 11 mm
- Profundidad de exploración: 30 - 150 mm





VER MÁS

DRAMÍNSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Polonia



+48 89 675 26 00



ultrasound@draminski.com

Síganos:



www.draminski.com