



Latido cardiaco, Bovino




Feto Bovino



Ovarios Bovino



Útero Bovino

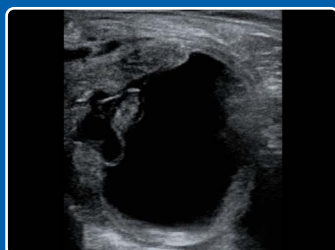

Gestación Equina

IMÁGENES DE DIAGNÓSTICO



VER MÁS

DRAMINSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Polonia

+48 89 675 26 00 @ sales@draminski.com

Síganos:

www.draminski.es

v.1987270426ES

DRAMINSKI
TECHNOLOGY

ECÓGRAFO INALÁMBRICO



airScan
pro

Doppler color | Resistente al agua | Ligero

www.draminski.es

Dramiński airScan pro

Toma ventaja de la novedad y ve un paso adelante

Ecógrafo ligero, robusto e inalámbrico diseñado para veterinarios bovinos y equinos.

Con una carcasa **de aluminio impermeable**, la tecnología de punta proporciona una calidad de **imagen superior** acompañado por un modo de **Doppler** sensible.

El teclado ergonómico junto con las gafas de realidad aumentada **inalámbricas iLens** mejoran significativamente el flujo de trabajo. Las baterías intercambiables garantizan suficiente energía para todo el día de escaneo.

Datos técnicos

- **Sondas** (¡sondas FIJAS!):
Rectal lineal 4,2-12,5 MHz, alcance hasta 19 cm
Rectal convexa 3,0-7,0 MHz, alcance hasta 30 cm
- **Tiempo de funcionamiento de la batería:**
Hasta 2 horas con la batería estándar
Hasta 4 horas con la Power Battery
- **Tiempo de carga de la batería** (5V 3A QC, PD):
Hasta 2 horas – batería estándar
Hasta 4 horas – Power Battery
- **Peso** (con sonda y batería):
Aprox. 0,62 kg – batería estándar
Aprox. 0,72 kg – Power Battery
- Resistente al agua con clasificación IP65
- Compatible con el sistema Android/iOS en el teléfono o la tableta

airScan
pro

Características principales

- **Conexión inalámbrica** con su dispositivo móvil o **gafas iLens**
- La misma aplicación para el resto de nuestras sondas abdominales inalámbricas
- El modo **Doppler color y power**, permite diagnosticar vacas preñadas 18 días después de la IA, mediante la evaluación del flujo sanguíneo del CL
- Pequeño y práctico para enganchar al cinturón
- **Baterías intercambiables**
- Carga a través de un cable **USB-C** estándar en casa o en el coche
- **Teclado de membrana** con indicador de carga de batería

Aplicación

	airScan pro rectal LINEAL	airScan pro rectal CONVEXA
Reproducción bovina	+	+
Reproducción equina	+	+
Reproducción de pequeños ruminantes		+
Determinación de sexaje fetal	+	+
Flujo sanguíneo del CL	+	+
Pulmones	+	+
Estado corporal	+	+
Ubre y pezones	+	
Hígado		+
Tracto gastrointestinal	+	+
Tendones	+	

Medidas

- Cuadrícula
- Distancia
- Edad del feto



Aplicación
Dramiński airScan pro
Conecte airScan pro a su dispositivo.




DESCARGAR EN
Google Play



Consíguelo en el
App Store

El kit incluye

- **airScan pro** con sonda rectal lineal o rectal convexa integrada
- Cinturón con sistema de montaje rápido
- 2 baterías externas
- Cargador de batería
- Maletín de transporte
- Manual de usuario (memoria USB)

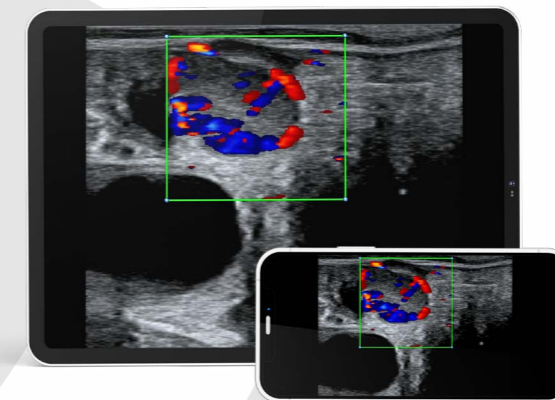

Doppler de CL bovino

